


## 052A 型 ニードル・バイオプシー練習ファントム

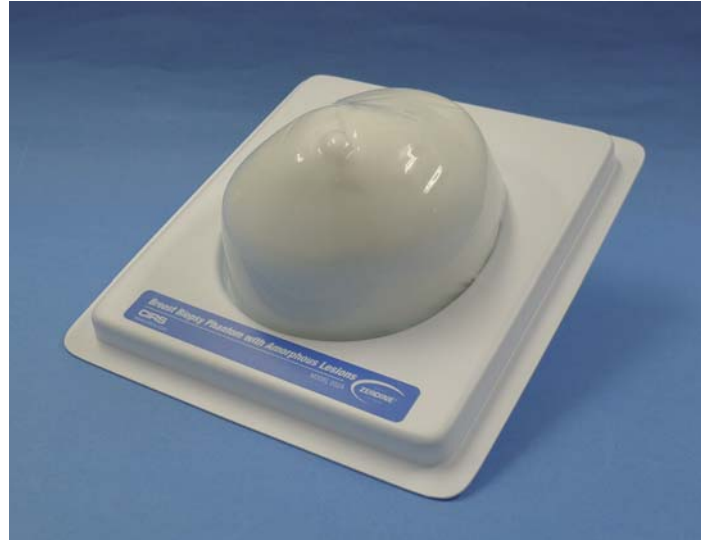

### 特 徴

- ニードル・バイオプシー超音波ガイド練習用
- 吸引可能シスト、生検可能マス内蔵
- コンパクト、軽量、持ち運び容易
- 新装置テスト、デモ及び新ガイド技術開発用
- 米国特許組織等価材採用

### 概 要

モデル 052A は、仰向け状態の平均的な女性乳房を模擬してデザインされたニードル・バイオプシーの超音波ガイド練習用ファントムです。

平均的な乳房組織の超音波特性に合致する組織等価材で成型された本ファントムは、外側を薄膜で保護されていますので、封入等価材の含水率の低下を最小限に抑えるとともに、穿刺の際の針への抵抗感や大きなマスの触診などの予備実習を行うことができます。

ファントムは、トレーに固定されていますので安定した手のポジションで練習を行うことができます。

ファントムの内部には、吸引可能なシストと生検可能な密度の高いマスのターゲットがランダムに埋め込まれています。

本製品は、初心者への練習用としてだけでなく、熟練者の向上用としてもご利用いただけます。また、新しい装置のテスト、デモまたは新しいガイド技術の開発、実験などにも適しています。


尚、モデル 052A は、練習用ファントムとして何回も使用できますが、製品の性質上ファントム内の水分は自然蒸発します。更に、穿刺回数が多くなるにつれて蒸発量が増加し、使用可能期間が短くなりますのでご了承ください。

保証期間は、穿刺前の正常保管（未使用状態）にてご購入後6ヶ月間です。

- 注記：仕様は、予告無く変更されることがあります。

## Model 052A Specifications

### ◆ Phantom

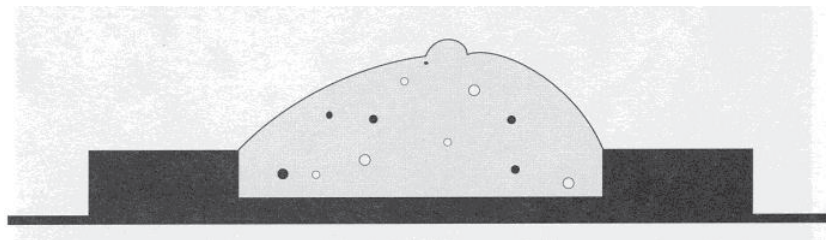

- ◇ 容積 600 cc      ◇ 長さ 15 cm      ◇ 幅 12 cm
- ◇ 高さ 7 cm      ◇ 素材 Zerdine™

### ◆ Targets

	識別色	サイズ	数	配置
シスト状マス	緑	8-15 mm	6	ランダム
高密度マス	黒	6-12 mm	6	ランダム
バックグラウンド材	白			

